



Cuidado de Tera Harz

LIMPIADOR Y CALENTADOR ULTRASÓNICO

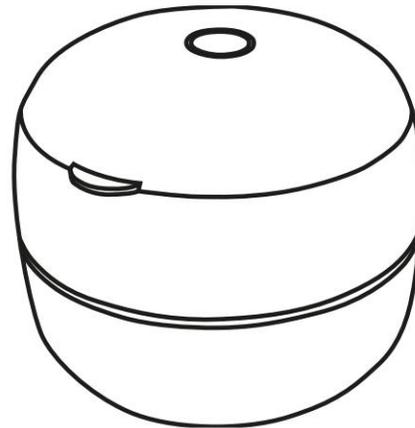


¡Mantén la salud siempre a tu alrededor!

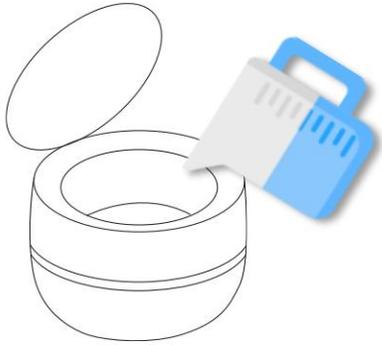


1

Abra la tapa y llene el tanque de acero inoxidable con agua.
ADVERTENCIA: ¡Utilizar un dispositivo sin agua puede dañarlo!

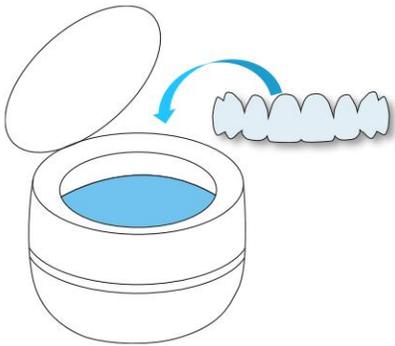


2

Coloque los objetos en el agua.
El objeto debe estar completamente sumergido.
No exceda el nivel "MÁX".

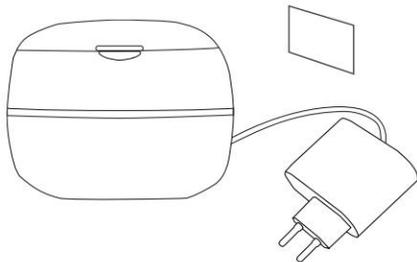


3 Cierre la tapa y conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

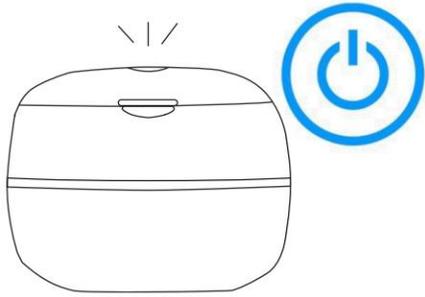

4


Presione el botón una vez y el indicador azul se encenderá para iniciar el ciclo de limpieza de 5 minutos. El indicador se apagará y el aspirador dejará de funcionar automáticamente una vez transcurridos 5 minutos. Si desea detener la limpieza en 5 minutos

del tiempo de trabajo, simplemente presione el botón nuevamente.

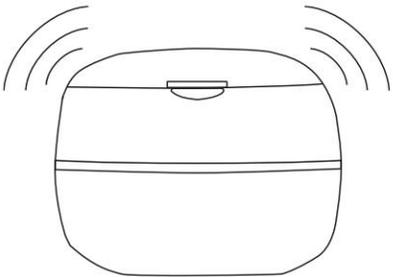

5

Durante la limpieza, se escuchará un zumbido. Esto significa que el dispositivo está funcionando.


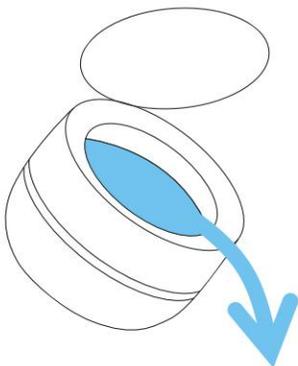


6

Una vez finalizada la limpieza, desconecte el cable de alimentación, abra la tapa y retire el alineador. Por último, vacíe el agua del depósito en la dirección de la flecha. Limpie y seque el depósito. Nota: No moje el botón de funcionamiento al vaciar el agua.

6-1 Al desechar el agua, tenga cuidado de no dejar que toque el botón de operación y cable de alimentación.


(Envuelva el cable de alimentación como se muestra en la imagen para evitar que entre agua).

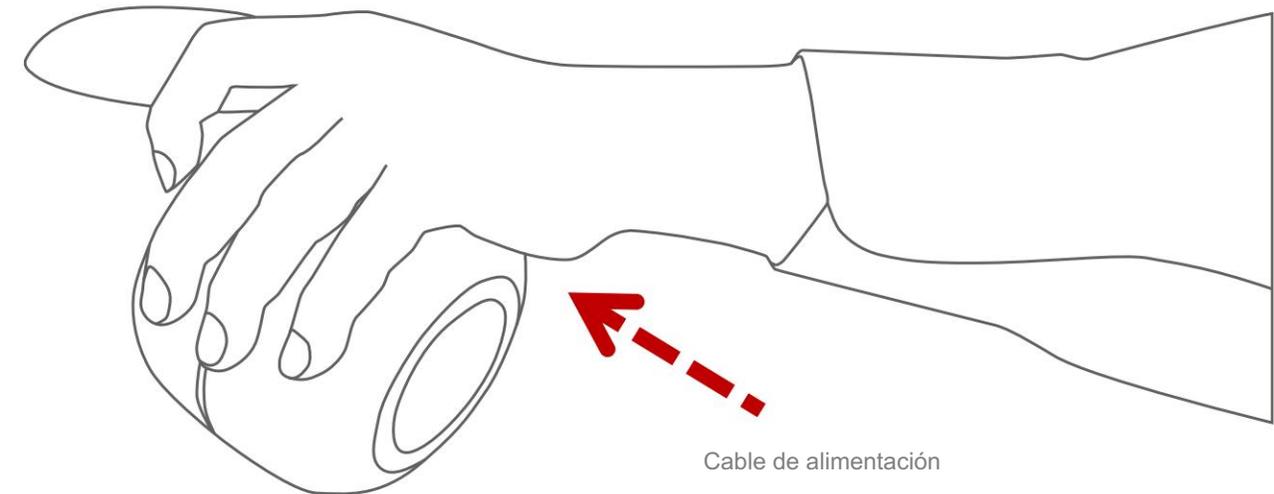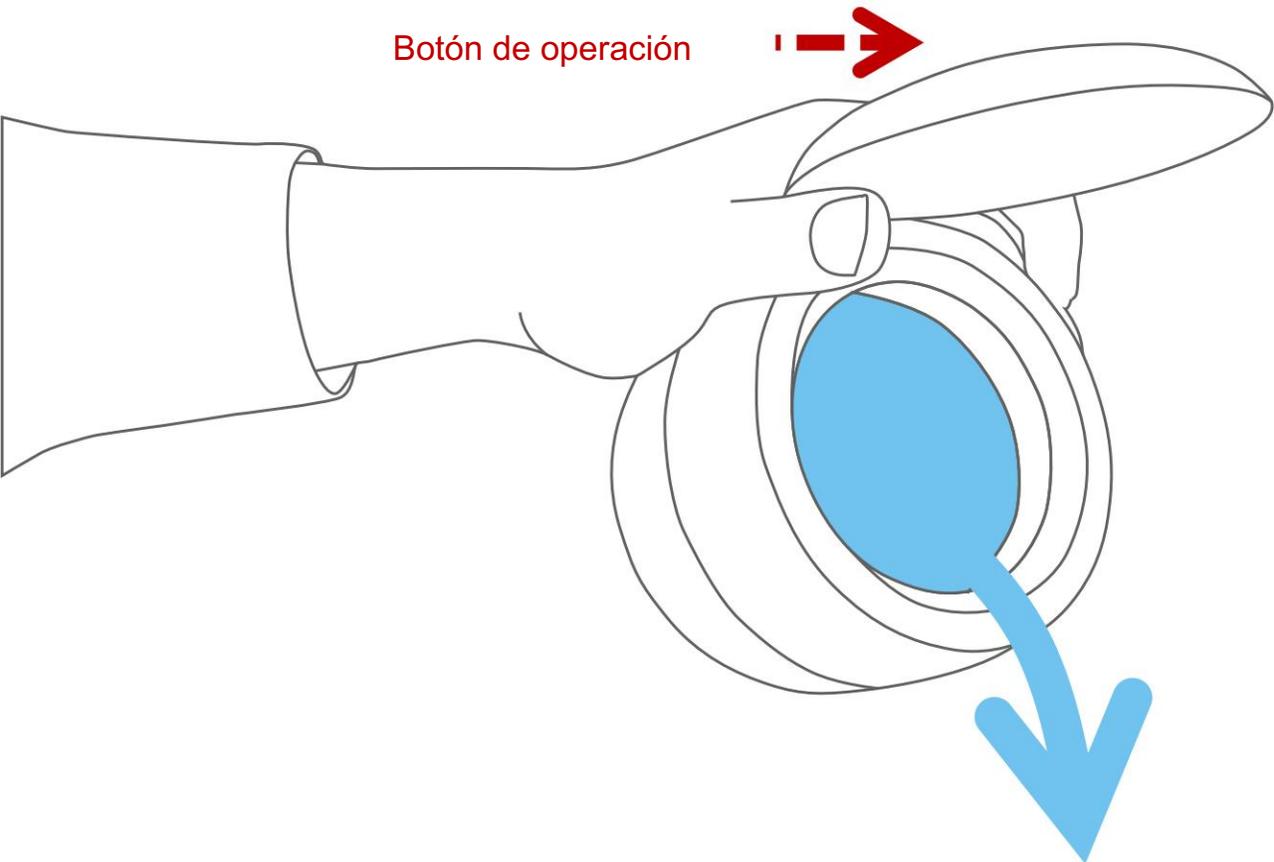

Limpieza del

tanque El interior necesita una limpieza periódica.


Después de su uso, límpielo con algodón o papel de seda para mantener el tanque limpio y sin polvo.

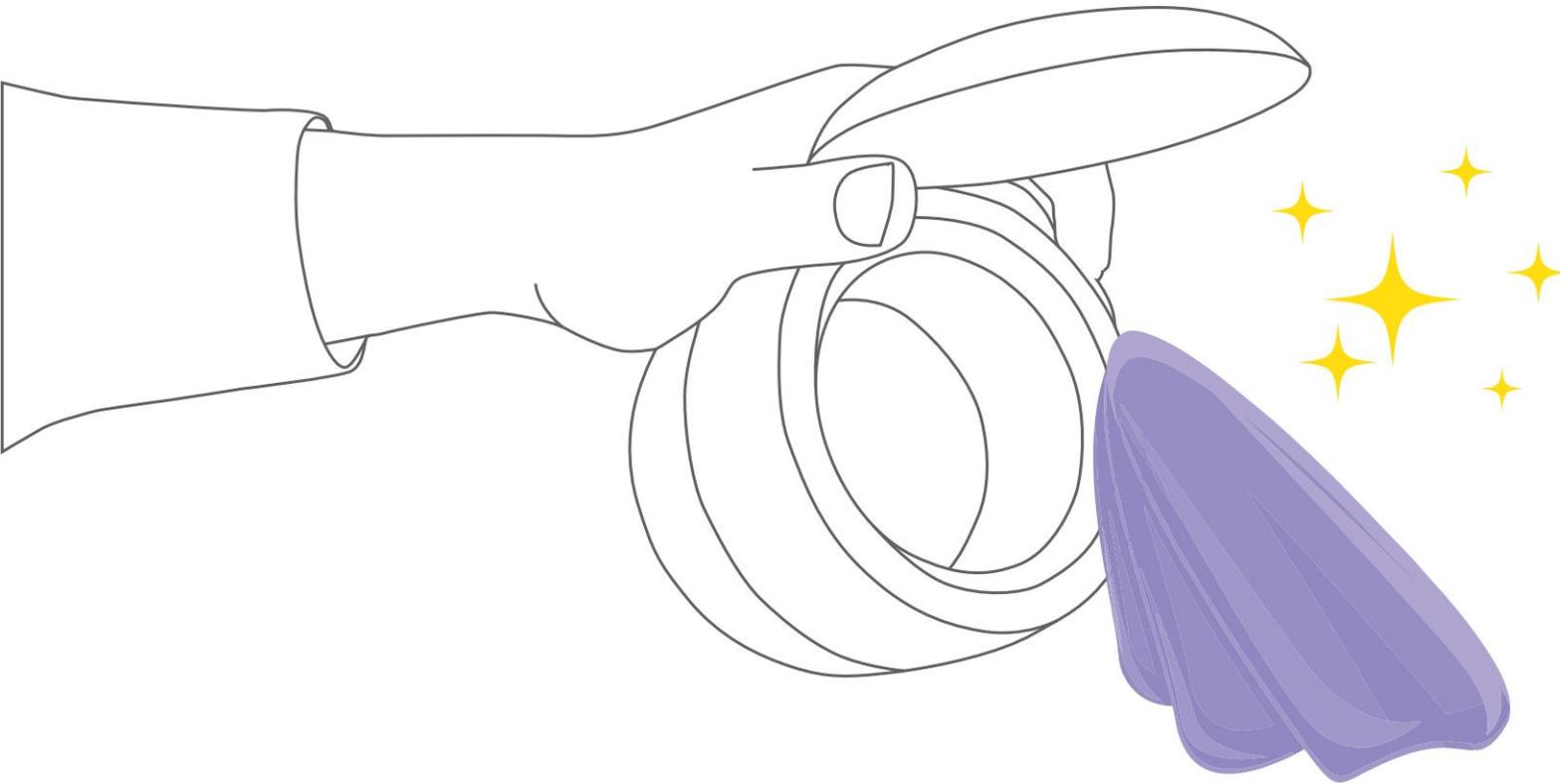



Limpieza de tanques

- Utilice agua para la limpieza general.
- Limpieza a fondo Para obtener mejores resultados, Puedes añadir unas gotas de detergente universal.
- Recomendamos utilizar detergente lavavajillas comercial, preferiblemente sin sustancias reponedoras de lípidos ("bálsamo").
- Para fines de limpieza profesional, detergentes de limpieza especiales. Se puede utilizar. Descubra qué concentrado es adecuado para sus objetos. a limpiar y el tipo de contaminación. Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el enchufe de alimentación. Nunca sumerja el dispositivo, el cable o el enchufe de alimentación en agua u otro líquido con fines de limpieza y cuidado.

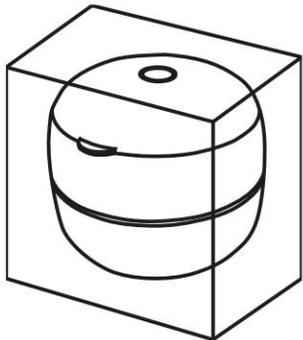

Almacenamiento - Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



Uso universal

Además del alineador, puedes limpiar los siguientes elementos.

- Artículos personales: Gafas, dentaduras postizas, cepillos de dientes, hojas de afeitarse, artículos para bebés, etc.
- Joyas: Collares, anillos, pendientes, pulseras, cadenas de reloj, monedas, etc.
- Piezas metálicas: Monedas, medallas, insignias, válvulas, etc.

Las piedras con marcos sueltos, los adornos pegados en elementos decorativos y los elementos sueltos podrían desprenderse durante el proceso de limpieza.

Consulte a su dentista, especialmente en el caso de dentaduras postizas que incluyan carillas.



Precaución

- Al llenar el depósito asegurarse siempre de no sobrepasar la marca "MAX".
- No utilice limpiadores agresivos o abrasivos.
- No exponga el dispositivo a temperaturas inferiores a -10°C ni superiores a 40°C.
- DETERGENTE DE LIMPIEZA:

No utilice detergentes inflamables o explosivos.

En caso de dificultad se debe utilizar un detergente de limpieza especial.

y/o suciedad persistente, como grasa, resina, óxido, cera, pigmentos, etc.

que no se puede eliminar con agua y un limpiador multiusos.



UN PELIGRO PARA LOS NIÑOS

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas o mentales restringidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, incluidos niños, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido capacitación en el funcionamiento del dispositivo.



- Los niños no deberán realizar tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin supervisión.
- **Guarde el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.**
- Los niños no deben jugar con el material de embalaje.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA COMO RESULTADO DE LA HUMEDAD



- No utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas.
- **Evite que el dispositivo, el cable y el enchufe de red caigan al agua u otros líquidos.**
- Si el aparato ha caído al agua, desenchufe inmediatamente el aparato de la red eléctrica y sólo entonces retire el aparato del agua.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No utilice el dispositivo si éste o el cable muestran signos visibles de daño.
- Conecte el enchufe únicamente a una toma de corriente correctamente instalada, que sea fácilmente accesible y que suministre una tensión que coincida con la placa de características.
- La toma debe ser fácilmente accesible después de la conexión.
- Garantiza que el cable no se dañe por bordes afilados o superficies calientes.

ESPECIFICACIÓN

Nombre	Cuidado de Tera Harz
Información	Limpiador ultrasónico y calentador para alineadores
Tamaño total	115 x 115 x 103 mm, Φ 115 x 103 H
Tamaño del tanque	80 x 80 x 40 mm
Capacidad del tanque	200 ml. Espacio suficiente para dos alineadores.
Peso	325 gramos
Tiempo	5 min (Apagado automático)
Temperatura máxima	50 (Después de 2 operaciones, 45°C)
Modo de operación	<ol style="list-style-type: none">1. Ultrasónico (Una vez)2. Calentador + Ultrasónico (Dos veces)3. Apagar (Tercero)
Potencia ultrasónica	24W
Frecuencia ultrasónica	42 kHz
Voltaje de entrada	CA 100-240 V
Voltaje nominal	12 V/2 A